

HPLC/UHPLC用カラム



**FlexFire C18**

**野村化学株式会社**



## FlexFire C18


### HPLC⇔UHPLCをもっと身近に

FlexFireシリーズは5 $\mu$ m, 2.6 $\mu$ m, 1.6 $\mu$ mがラインナップされています。そのため、システムに合わせて品質管理⇔研究・開発での移管も可能となるため、分析条件の設定が容易に設定できます。

FlexFire C18は極めて汎用性が高く、高カーボン化による疎水性相互作用を重視した特長があります。そのため、HPLC(UHPLC)における基本に忠実な結果を与え、今後の方針を定めるための重要な情報を提供します。

### 洗練されたシリカゲルを採用したFlexFire C18のスペック

FlexFire C18	
粒子径	1.6 $\mu$ m, 2.6 $\mu$ m, 5 $\mu$ m
官能基	Octadecyl
表面積	340m <sup>2</sup> /g
細孔容積	1.0mL/g
細孔径	11nm
カーボン化率	22%
エンドキャップ	あり
使用pH範囲	pH1-10
使用温度範囲	~80℃
使用圧力範囲	
1.6 $\mu$ m:	800bar (80MPa, 11,603psi)
2.6 $\mu$ m:	600bar (60MPa, 8,702psi)
5 $\mu$ m:	300bar (30MPa, 4,351psi)

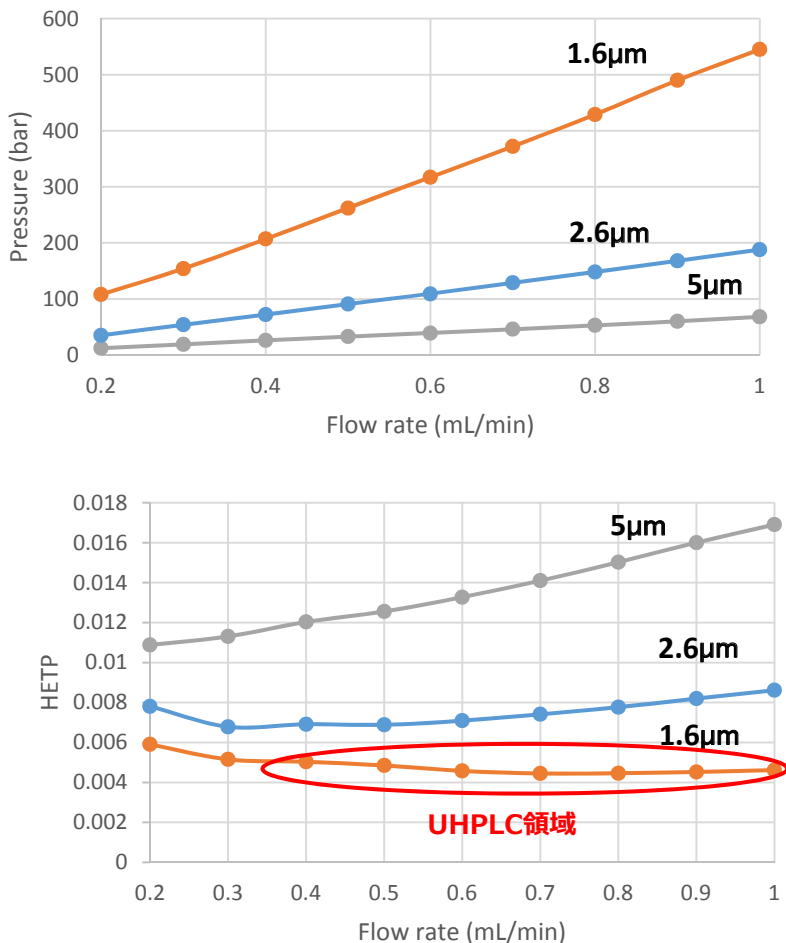


右図は流速と理論段高さの関係をプロット。粒子径が小さくなるほど広い流速範囲において高い理論段数を示します。

お手持ちのシステムに合わせて粒子径を選択し、最適な流速を分析条件に組み込むことによって最高のパフォーマンスを得ることができます。

#### Conditions;

Column: FlexFire C18 (2.0x50mm)  
 Mobile phase: Acetonitrile/Water=60/40  
 Flow rate: 0.2mL/min~1.0mL/min  
 Temperature: 40℃  
 Detection: UV254nm  
 Sample: Naphthalene  
 Injection volume: 0.16 $\mu$ L

## HPLC⇔UHPLCメソッド移管例

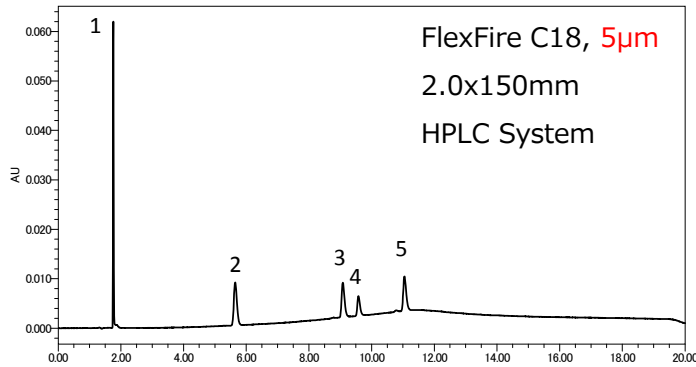


### FlexFire C18, 5µm (2.0x150mm)

**Conditions;**  
 Column: FlexFire C18, 5µm (2.0x150mm)  
 Mobile phase: A) 25mM HCOONH<sub>4</sub>, pH3.0  
 B) Acetonitrile

Gradient:	min	mL/min	%A	%B	Curve
	0.00	0.189	90	10	6
	8.44	0.189	75	25	6
	16.88	0.189	75	25	6
	17.06	0.189	90	10	6

Temperature: 40°C  
 Detection: UV260nm  
 Sample: 1.Gly-Tyr 2.Val-Tyr-Val 3.Met-Enk  
 4.Angiotensin II 5.Leu-Enk  
 injection volume: 1.2µL

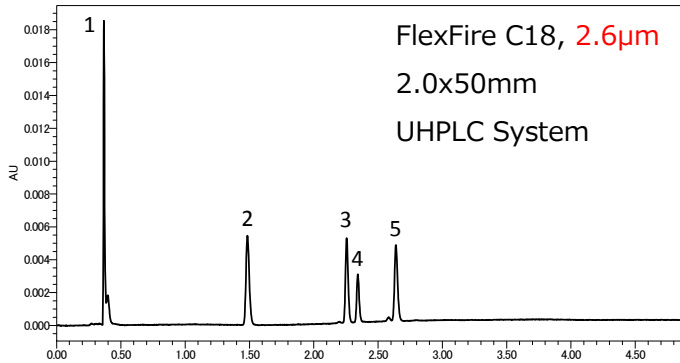


### FlexFire C18, 2.6µm (2.0x50mm)

**Conditions;**  
 Column: FlexFire C18, 2.6µm (2.0x50mm)  
 Mobile phase: A) 25mM HCOONH<sub>4</sub>, pH3.0  
 B) Acetonitrile

Gradient:	min	mL/min	%A	%B	Curve
	0.00	0.364	90	10	6
	1.46	0.364	75	25	6
	2.93	0.364	75	25	6
	2.96	0.364	90	10	6

Temperature: 40°C  
 Detection: UV260nm  
 Sample: 1.Gly-Tyr 2.Val-Tyr-Val 3.Met-Enk  
 4.Angiotensin II 5.Leu-Enk  
 injection volume: 0.4µL

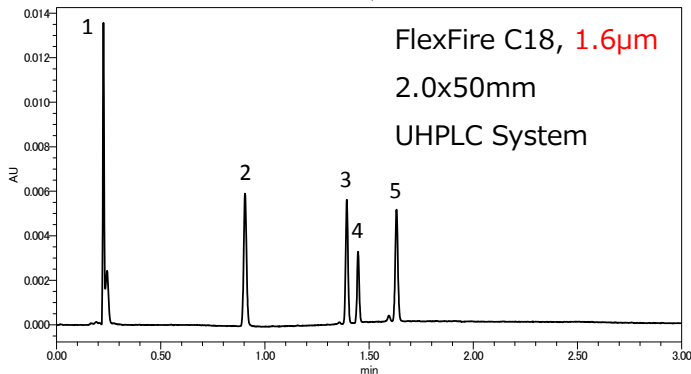

### FlexFire C18, 1.6µm (2.0x50mm)

**Conditions;**  
 Column: FlexFire C18, 1.6µm (2.0x50mm)  
 Mobile phase: A) 25mM HCOONH<sub>4</sub>, pH3.0  
 B) Acetonitrile

Gradient:	min	mL/min	%A	%B	Curve
	0.00	0.592	90	10	6
	0.90	0.592	75	25	6
	1.80	0.592	75	25	6
	1.82	0.592	90	10	6

Temperature: 40°C  
 Detection: UV260nm  
 Sample: 1.Gly-Tyr 2.Val-Tyr-Val 3.Met-Enk  
 4.Angiotensin II 5.Leu-Enk  
 injection volume: 0.4µL

System: Waters ACQUITY UPLC H-Class Plus  
 mixer: 100µL


## ペプチド分析のメソッド移管例

FlexFireシリーズは研究開発→品質管理、品質管理→研究開発へのメソッド移管をスムーズに実行します。上記分析例は既存の4.6x150mm, 5µmメソッドをソフトウェアによってセミマイクロ化および微粒子化へのメソッドを導き出して、そのまま分析を実行した結果です。

ほぼ同等の分離度を示しているため各セクションにおける微調整は必要とせず、思い通りの結果を得ることができます。これは、粒子径が違っても同じ物性のシリカゲル基材であること、C18基のボンディングおよびエンドキャップが全て同じように製造されていることを示しています。

また、1.6µmパーティクルへ進むほど、ピーク形状はシャープになり分析時間も大幅に削減することが可能となります。現状がHPLCであっても、将来的にUHPLCへ以降した場合の目安が容易に予測できます。

## カラム耐久性

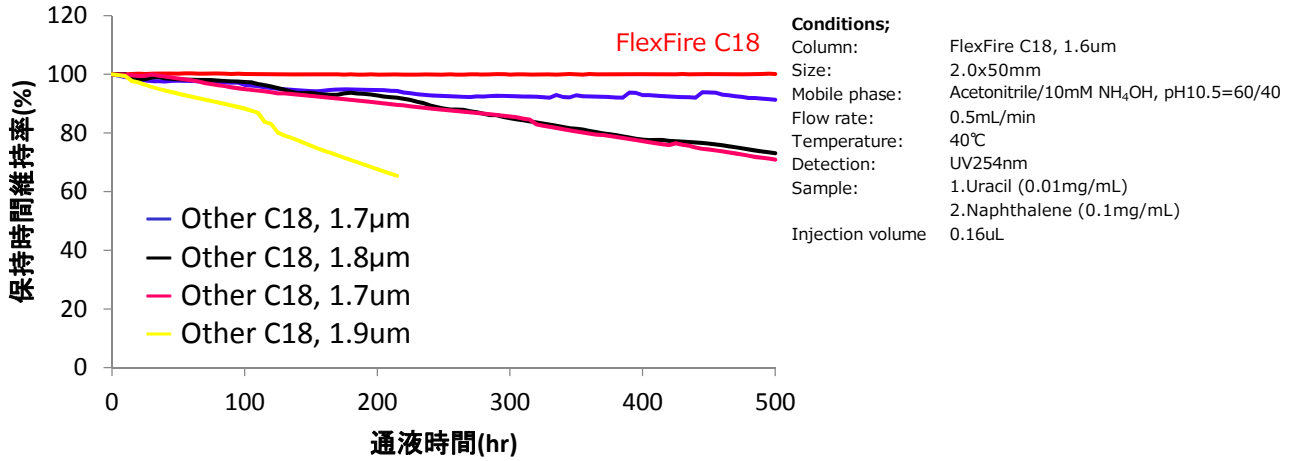

シリカゲル基材を使用した充填カラムは、酸性条件下で加水分解による結合の切断が起こり、アルカリ条件下ではシリカゲルの溶解が起こります。

FlexFire C18は基材の強化および高密度な結合をしているため高い耐久性を発揮します。

## 価格表

内径(mm)	長さ(mm)	粒子径(µm)	ステンレスカラム		メタルフリーカラム	
			価格(円)	商品コード	価格(円)	商品コード
2.0	35	1.6µm	73,000	301-I20035W	96,000	301-I20035MFW
			73,000	301-I20050W	96,000	301-I20050MFW
			75,000	301-I20075W	98,000	301-I20075MFW
			78,000	301-I20100W	101,000	301-I20100MFW
			83,000	301-I20150W	106,000	301-I20150MFW
			—	—	—	—
	50	2.6µm	63,000	301-L20035W	86,000	301-L20035MFW
			63,000	301-L20050W	86,000	301-L20050MFW
			65,000	301-L20075W	88,000	301-L20075MFW
			68,000	301-L20100W	91,000	301-L20100MFW
			73,000	301-L20150W	96,000	301-L20150MFW
			78,000	301-L20250W	101,000	301-L20250MFW
	75	5µm	58,000	301-520035W	81,000	301-520035MFW
			58,000	301-520050W	81,000	301-520050MFW
			60,000	301-520075W	83,000	301-520075MFW
			63,000	301-520100W	86,000	301-520100MFW
			68,000	301-520150W	91,000	301-520150MFW
			73,000	301-520250W	96,000	301-520250MFW

### ■ お問い合わせ/Contact us



野村化学株式会社  
 〒489-0004 愛知県瀬戸市日の出町15  
 Tel: 0561-48-1853 Fax: 0561-48-1434  
 e-mail: info@develosil.net

Nomura Chemical Co., Ltd.  
 15, Hinode-cho, Seto, 489-0004, Japan  
 Tel: +81-561-48-1853 Fax: +81-561-48-1434  
 e-mail: info@develosil.net

## Develosil USA

Develosil USA  
 10060 Carroll Canyon Rd. Ste. 100 San Diego, CA 92131  
 Phone: 858-800-2433  
 Web: <https://develosil.us/>