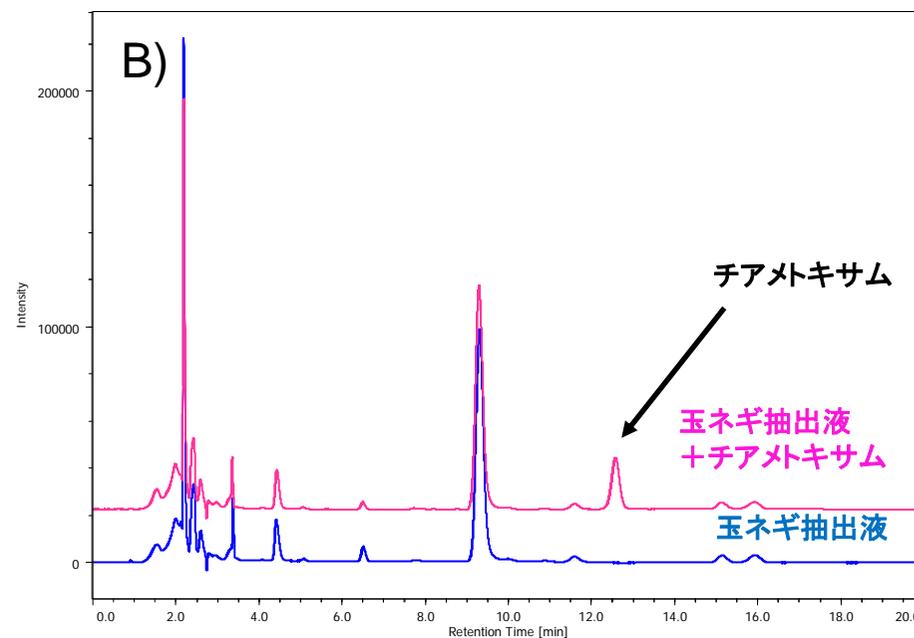
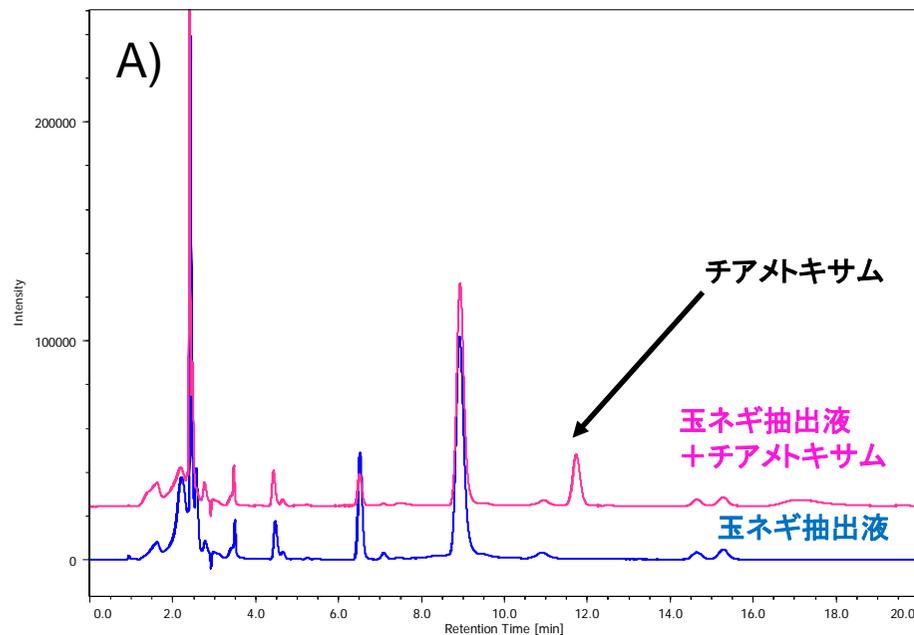


## チアマトキサムの分析

**Conditions;**

**Column:** A) Develosil XG-C18LC-5 B) Develosil ODS-5

**Size:** 4.6x250mm

**Mobile phase:** Acetonitrile/Water=15/85

**Temperature:** 40°C

**Detection:** UV258nm

**System:** 日本分光/LC-2000plus series

**Injection volume:** 20uL

玉ネギ21.5gに水120mLを加えミキサーにて粉碎。その後、遠心分離にて得られた上澄液を0.45umのフィルターで濾過したものをサンプルとした。添加したチアマトキサムは6.0ug/mLとなるように調製した。